

A close-up, low-angle shot of a white, curved spa component, possibly a headrest or a part of a hot tub, set against a dark blue background. The lighting is soft, highlighting the smooth, rounded edges of the object.

WellSpa iO™



พร้อมแล้วหรือยัง กับนวัตกรรม ใหม่ล่าสุด

ครั้งแรกกับการประสานพลังของการดูแลสุขภาพแบบ
องค์รวมในทุกมิติ เข้ากับเครื่องมือแห่งความงาม
ให้พลังแห่งการดูแลร่างกายทั้งหมดมาอยู่ในมือคุณ



“นู สกิน” แปรณด์ยอดขายบิวดี้ แกดเจ็ต อันดับ 1 ของโลก 5 ปีซ้อน*

ขอนำเสนอ...

อุปกรณ์อัจฉริยะ เพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและความงาม แบบครบวงจร

เจาะตลาดสุขภาพและความงามที่กำลังเติบโตเพื่อช่วยให้คุณพร้อมสำหรับความสำเร็จก่อนใคร

* Source: [Euromonitor International Limited](#); Retail Value RSP terms; all channels; 2017 to 2021. Beauty Systems are at-home Skin Care Beauty Devices that are exclusively paired or recommended to be used with a topical consumable of the same brand. Claim verification based on Euromonitor custom research and methodology conducted January-March of 2022. Sales of at-home skin care beauty devices includes sales of electric facial cleansers as defined in Passport database. This category does not include hair care/removal appliances, body shavers, and oral care appliances.



หนึ่งสิ่ง เพื่อทุกคน ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศใดและเน้นเรื่องใด คุณก็ปรับประสบการณ์ WellSpa iO ให้เหมาะกับความต้องการส่วนบุคคลของคุณได้



สุขภาพองค์รวม
เพื่อสุขภาวะโดยรวม



ความมั่นใจในรูปร่าง
เพื่อรูปร่างที่ดูมีทรงตรงยิ่งขึ้น



ฟิตเนสและไลฟ์สไตล์
เพื่อการฟื้นฟูและผ่อนคลาย

ขอเชิญพบกับ...

อุปกรณ์อัจฉริยะเพื่อการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและความงาม
เครื่องแรกของเรา





ไฟแสดงสถานะ _____
ปุ่มเปิด-ปิด | การเลือกเวลา _____



แท่นชาร์จแม่เหล็กไร้สาย



ageLOC



แบตเตอรี่อ่อน

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
เมื่อแบตเตอรี่อ่อน

แท่นชาร์จแม่เหล็กไร้สาย






ageLOC





แท่นชาร์จแม่เหล็กไร้สาย

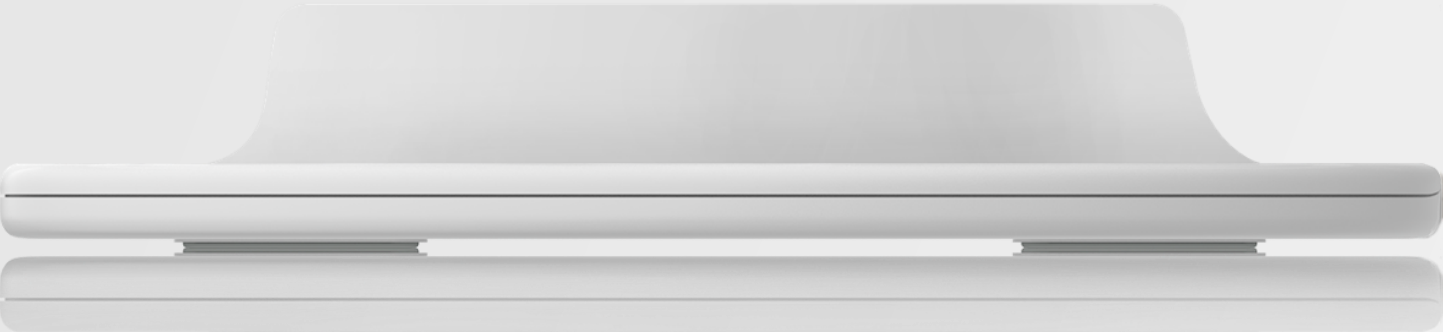

แบตเตอรี่อ่อนมาก

เมื่อแบตเตอรี่เหลือน้อยมาก ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเป็นสีเหลืองอำพัน และอุปกรณ์จะปิด

หากคุณกดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องจะเปิดและไฟจะกะพริบการแจ้งเตือนอีกครั้ง นี่แสดงว่ามีแบตเตอรี่ไม่เพียงพอที่จะทำรีตเมนต์

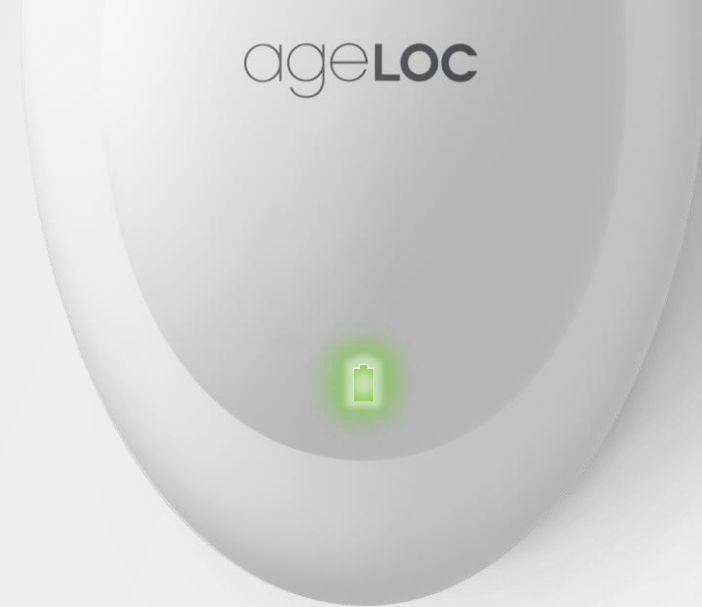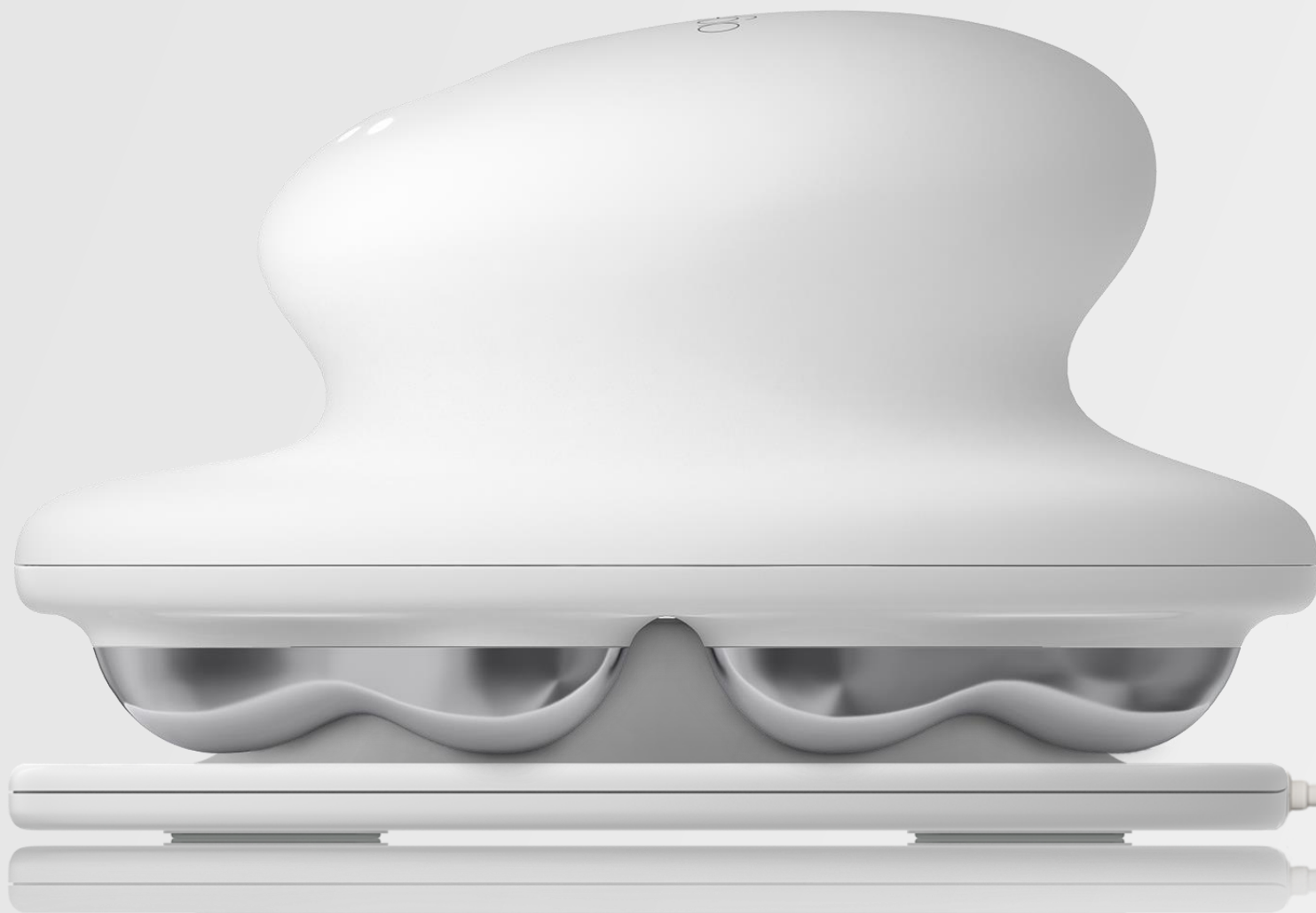


กำลังชาร์จ

กำลังชาร์จ

ขณะชาร์จอุปกรณ์ ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะ
กะพริบเป็นสีเขียว
ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว
ค้างเมื่ออุปกรณ์ชาร์จเต็มแล้ว



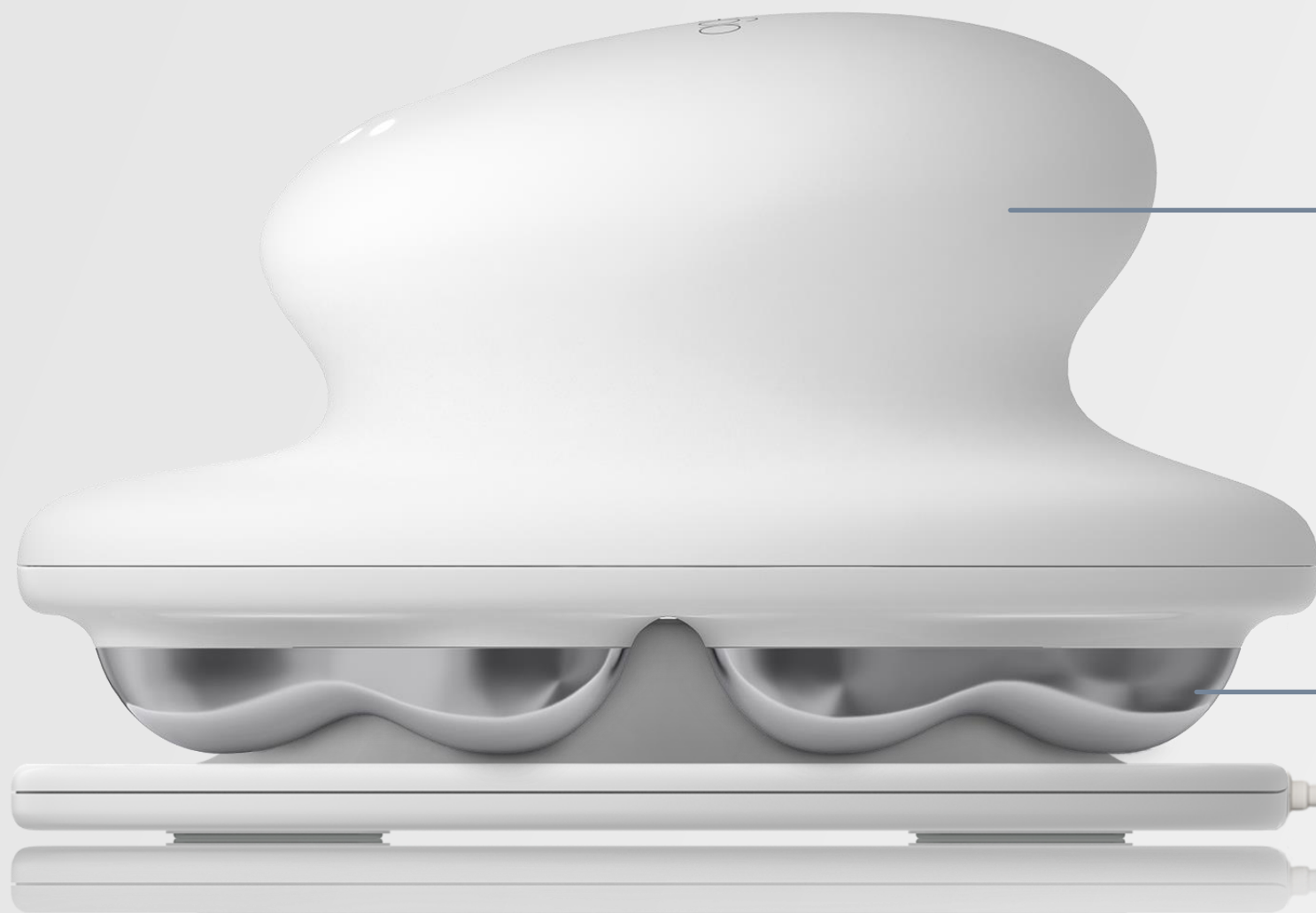

จับถนัดมือ

การออกแบบปุ่มนวดโลหะ
ที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร



การออกแบบปั้มนวดโลหะที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร

เราสร้างปั้มนวดโลหะที่ไม่เหมือนใครของ WellSpa iO เพื่อมอบประสบการณ์การนวดที่นุ่มนวลและสบาย พร้อมการกระตุ้นผิวด้วย เราออกแบบให้ปั้มนวดมีลักษณะพอดีสำหรับการเคลื่อนที่ไปทั่วผิวของคุณอย่างสิ้นไหลนุ่มนวล เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่สมบูรณ์แบบจากการใช้งาน





ADAPTIVE MICROCURRENT TECHNOLOGY

ที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร

Adaptive Microcurrent Technology
เป็นคุณลักษณะเฉพาะที่สำคัญของ WellSpa iO:

- อุปกรณ์จะประเมินค่าการนำไฟฟ้าของผิวหนังอย่างต่อเนื่องในขณะใช้งาน
- ใช้ข้อมูลนี้เพื่อปรับความเข้มของกระแสไฟฟ้าตามค่าการนำไฟฟ้าของผิวหนัง ช่วยให้ท่านได้รับกระแสไฟฟ้าสูงสุดแต่สบายที่สุด
- ความเข้มของกระแสไฟฟ้าที่ปรับแบบส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องนี้จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละกริยาเมนต์ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์สูงสุดจากการกระตุ้นผิว และนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุด






การเปิดเครื่อง

กดปุ่มเปิด/ปิดบนตัวเครื่อง 1 ครั้ง ไฟแสดงสถานะ
ทั้ง 5 ดวงจะสว่างขึ้นในครั้งแรกที่คุณเปิดอุปกรณ์
หลังจากนั้น WellSpa iO จะจดจำการตั้งค่าก่อนหน้า
ของคุณ จำนวนไฟแสดงสถานะที่ติดสว่างบ่งชี้เวลาการ
ทำรีตเมนต์ของคุณ



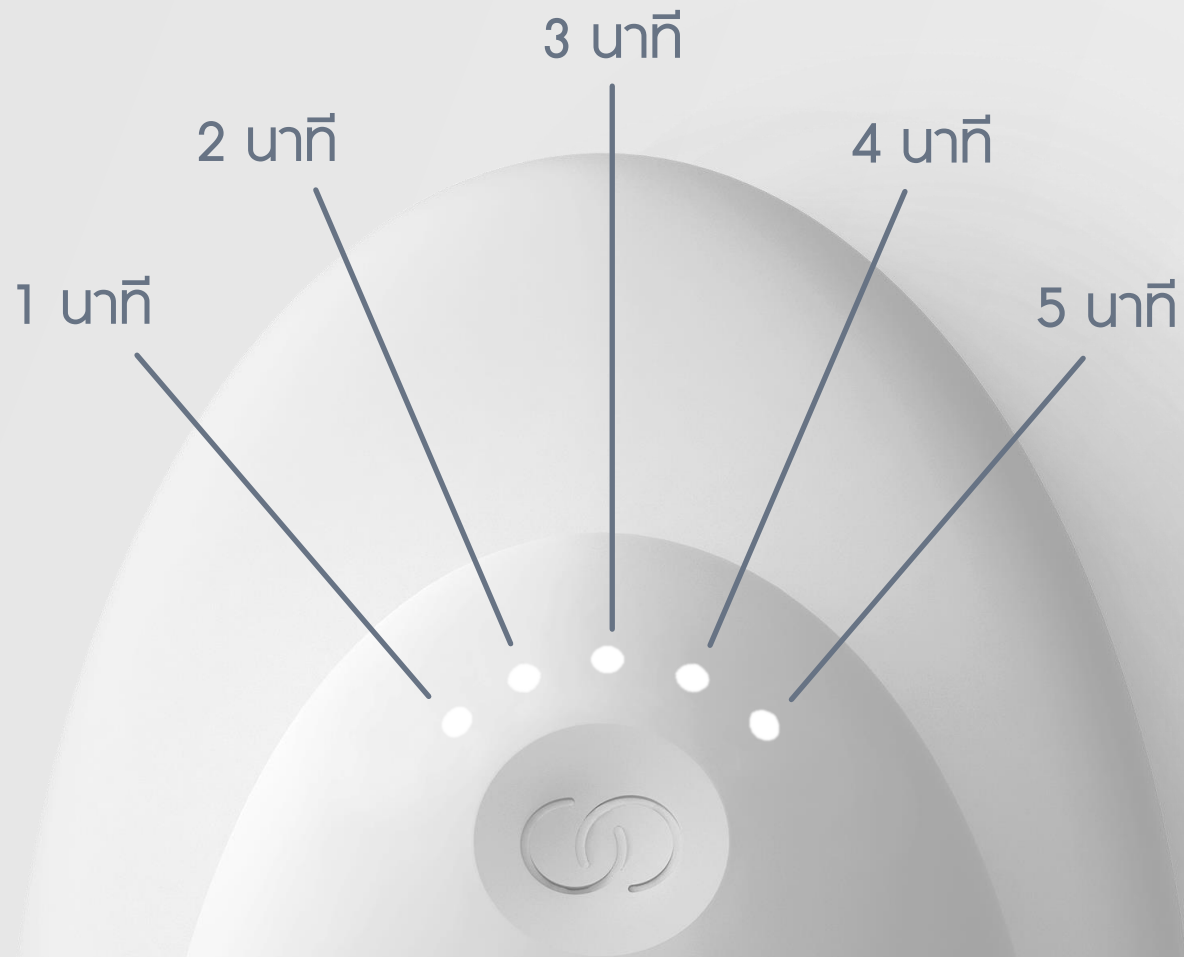

การตั้งเวลาสำหรับทำทรีตเมนต์

คุณสามารถตั้งเวลาใหม่ได้ โดยกดปุ่ม
เปิด/ปิด จนกว่าคุณจะได้เวลาที่คุณ
ต้องการ โดยสามารถเลือกช่วงเวลา
ได้ตั้งแต่ 1-5 นาที

ageLOC





การเริ่มทำทรีตเมนต์

ในการเริ่มต้น ให้วางอุปกรณ์ลงบนผิว
บริเวณที่คุณทา Body Serum หรือ
Body Activating Gel

อุปกรณ์จะส่งเสียง และการทำงาน
ของเครื่องจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ





การพักทำทรีตเมนต์

เมื่ออุปกรณ์ไม่ได้สัมผัสกับผิวหนัง
ของคุณในระหว่างทรีตเมนต์ หรือหาก
เจลหรือเซรั่มที่ทาไว้ซึมลงผิวหมดแล้ว
ผิวจะสูญเสียการนำไฟฟ้า คุณจะได้ยิน
เสียงเตือนและไฟแสดงสถานะจะหยุด
ทำงาน

การกลับมาทำทรีตเมนต์ต่อ

เมื่อคุณนำเครื่องมาสัมผัสกับผิวหนัง
อีกครั้ง เครื่องจะกลับมาทำงานต่อ
โดยอัตโนมัติ





เคลื่อนไหวเร็วเกินไป

จะมีไฟกระพริบและเสียงเตือน



สิ้นสุดการทำทรีตเมนต์

เมื่อสิ้นสุดการทำทรีตเมนต์
อุปกรณ์จะส่งเสียงและปิดโดยอัตโนมัติ

ใช้มือนวดผลิตภัณฑ์ที่ยังเหลืออยู่
ให้ซึมเข้าสู่ผิว





การปิดเครื่อง
กดที่ปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้จนกว่าไฟจะดับ



ส่วนประกอบ



แผ่นพับแนะนำการใช้งานเบื้องต้น




เครื่อง WellSpa iO™




ถาดรองเครื่อง



แท่นชาร์จแม่เหล็กไร้สาย

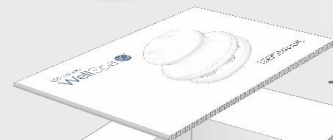

คู่มือการใช้งาน

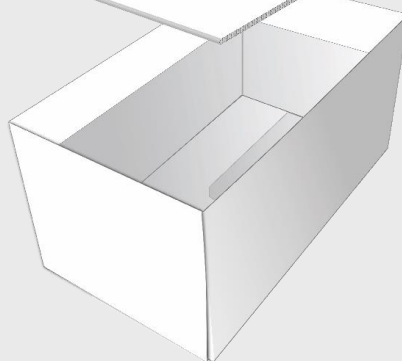

กล่อง







เสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวม

WellSpa iO + Body Activating Gel



ดูแลรูปร่าง

WellSpa iO + Body Serum



ผ่อนคลายร่างกาย

WellSpa iO + Body Activating Gel

ageLOC® Body Activating Gel



ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

Body Activating Gel ใช้กับ WellSpa iO สำหรับการบำบัดเพื่อเสริมสร้างสุขภาพแบบองค์รวมของคุณ ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อใช้คู่กับ WellSpa iO ...

- ช่วยส่งเสริมระบบไหลเวียนในร่างกายให้ดีขึ้น *
- ช่วยให้คุณรู้สึกมีสมาธิ/สมดุลมากขึ้น*
- สนับสนุนกระบวนการตามธรรมชาติของร่างกายในการกำจัดสารพิษผ่านการนวด*
- ช่วยให้คุณดูดีขึ้น*
- ช่วยปรับปรุงการตื่นตัวทางจิตให้ดีขึ้น*
- ช่วยให้ร่างกายกระปรี้กระเปร่า*
- ช่วยส่งเสริมสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดี*
- ส่งเสริมการนอนหลับพักผ่อนด้วยการนวดผ่อนคลาย*
- เพิ่มความรู้สึกแห่งความสุข*
- ageLOC มุ่งเป้าไปที่ต้นตอของปัญหา
- ช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและลดความเครียด*
- ริ้วรอยแห่งวัยเพื่อคืนความอ่อนเยาว์ *
- ช่วยให้แขนขาเบาสบายขึ้น*
- ช่วยกระตุ้นผิวให้ทำงานดีขึ้น ส่งเสริมให้ผิวเลดูอุ่มฟู
- สดใส*






คำแนะนำการใช้งาน

ลูบไล้เจลให้ทั่วบริเวณที่จะทำทรีตเมนต์ ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปที่บริเวณลำตัวเป็นลักษณะเส้นตรง จากล่างขึ้นบน (จาก A ถึง B เช่นในภาพด้านล่าง) เมื่อครบเวลาแล้วให้ย้ายไปยังส่วนถัดไปจนครอบคลุมบริเวณลำตัวทั้งหมด โดยหลีกเลี่ยงบริเวณใบหน้า ลำคอ หน้าอก และขาหนีบ

พื้นที่แนะนำ

- แขน
- ช่อก้น
- ขาท่อนล่างและท่อนบน

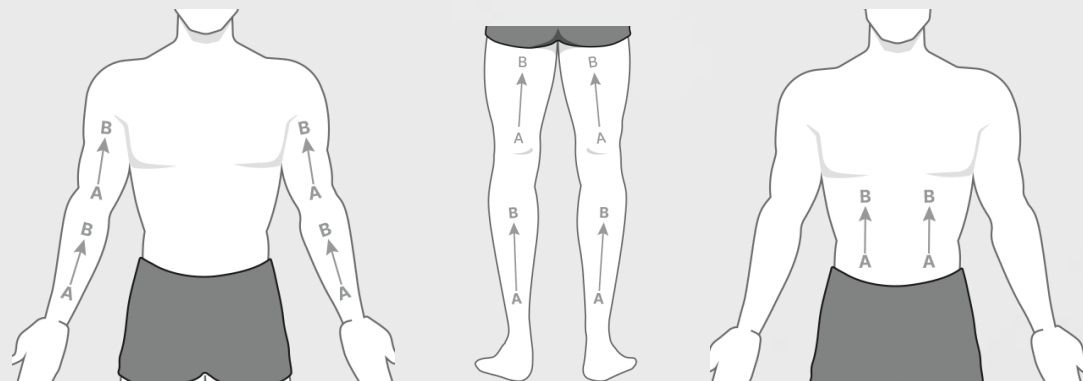

ภาพรวมของผลิตภัณฑ์

Body Serum ใช้ร่วมกับ WellSpa iO สำหรับการกรีดเมนต์เพื่อดูแลรูปร่างของคุณ
ผลลัพธ์ที่ได้เมื่อใช้คู่กับ WellSpa iO ...



- ลดเลือนเซลล์โลกเพื่อผิวที่แลดูเรียบเนียนและกระจ่างใส*
- ยกกระชับผิวให้แลดูอ่อนเยาว์ขึ้นอย่างเห็นได้ชัด*
- ช่วยลดความเหี่ยวย่นของผิว*
- ช่วยบำรุงผิวให้แลดูกระจ่างใส เรียบเนียน และสุขภาพดีขึ้น
- ช่วยฟื้นคืนผิวสุขภาพดี* ให้แลดูกระชับและเต่งตึงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดผ่านการเติมความชุ่มชื้นให้กับผิว*
- ageLOC มุ่งเป้าไปที่ต้นตอของปัญหาริ้วรอยแห่งวัยเพื่อคืนความอ่อนเยาว์*
- ปรับสีผิวให้สม่ำเสมอเพื่อผิวแลดูสว่างกระจ่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัด*
- ให้ผิวชุ่มชื้นและช่วยให้ผิวเรียบเนียน*




คำแนะนำการใช้งาน

ทาเซรั่มให้ทั่วบริเวณที่จะทำทรีตเมนต์ เลื่อนอุปกรณ์เบาๆ เหนือผิวหนังขึ้นไปยังจุดกึ่งกลางของร่างกาย(ตามแนวเส้นตรง) และเคลื่อนกลับลงมาซ้ำๆ เป็นวงกลม โดยหลีกเลี่ยงบริเวณใบหน้า ลำคอ หน้าอก และขาหนีบ

พื้นที่แนะนำ

- ต้นแขน
- ช่องท้อง
- ต้นขา/น่อง

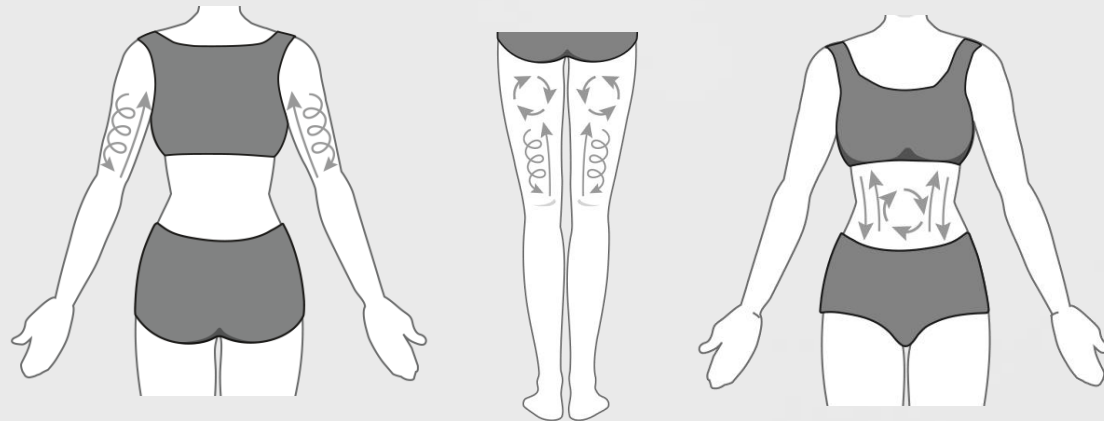




คำแนะนำการใช้งาน

ลูบไล้เจลให้ทั่วบริเวณที่จะทำทรีตเมนต์ ค่อยๆ เลื่อนอุปกรณ์ไปที่บริเวณลำตัวช้าๆ เป็นวงกลมขึ้น โดยเน้นบริเวณที่รู้สึกตึงหรือล้า โดยหลีกเลี่ยงบริเวณใบหน้า ลำคอ หน้าอก และขาหนีบ

พื้นที่แนะนำ (จุดละ 1 นาที)

- น่อง
- เอ็นร้อยหวาย
- ต้นขา
- แขน
- ไหล่
- ท้อง

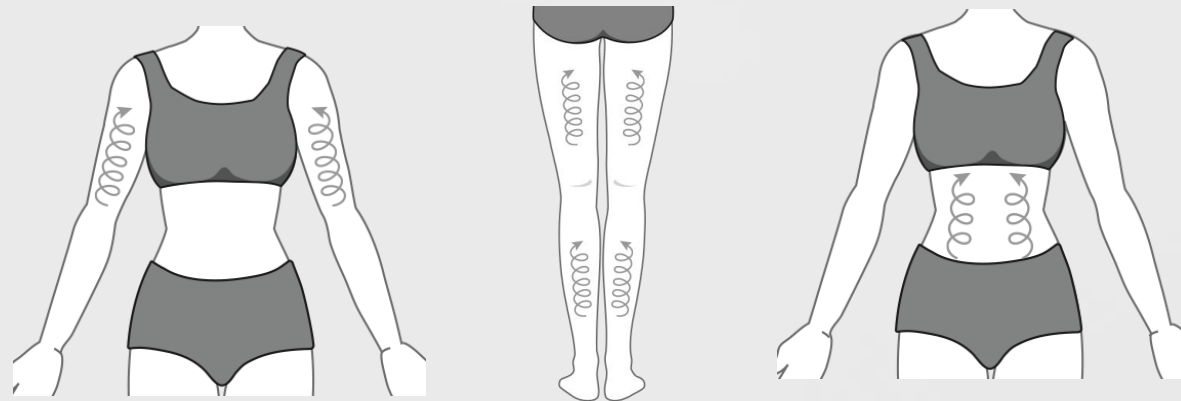



เตรียมพร้อมที่จะบอกลาผิวหมองคล้ำและแห้งกร้านของคุณ
เพื่อความรู้สึกที่เรียบเนียน ผลิตภัณฑ์ขัดผิวสำหรับคนรักผิวนี้
มีเม็ดสกรับจากเชลลูโลส ประสานพลังกับกรดไกลโคลิก
และเอนไซม์ปาเปนในการช่วยผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว

นี่คือผลิตภัณฑ์ขัดผิวกายแบบอ่อนโยนที่จะช่วยให้คุณพบกับ
ประสบการณ์ใหม่น่าประทับใจในการทำความสะอาดผิวกาย

ageLOC® Body Polish



ส่วนผสมทรงประสิทธิภาพแบบครบวงจรของ
สารขัดผิวแบบกระบวนการทางกายภาพ (เชลลูโลส)
สารขัดผิวแบบกระบวนการทางเคมี (กรดไกลโกลิก) และสารขัดผิวแบบเอนไซม์ (ปาเปน)
ทำงานร่วมกันเพื่อผิวที่เนียนนุ่มจนคุณสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลง
นอกจากนี้ส่วนผสมที่เป็นเอกลักษณ์นี้ยังช่วยเร่งการกระบวนการผลิตเซลล์ผิวตามธรรมชาติ
เพื่อเผยผิวที่เปล่งประกายอย่างอ่อนโยนได้อีกด้วย

Body Silhouette Blend การผสมผสานที่เป็นเอกลักษณ์ของส่วนผสมทางพฤกษศาสตร์
ที่ตรงเข้าจัดการกับปัญหาผิวในร่างกาย เช่น ปัญหาความหย่อนคล้อย
ให้ผิวแลดูยกกระชับ เต่งตึงเรียบเนียนขึ้น

เทคโนโลยี **ageLOC Blend** มุ่งเป้าไปที่ต้นตอของปัญหาริ้วรอยแห่งวัยเพื่อคืนความอ่อนเยาว์





เพราะอะไรคุณถึงหลงรัก Body Polish

- ผลิตเซลล์ผิวและขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว เพื่อให้ผิวนุ่มนวลและเรียบเนียน
- ช่วยกระตุ้นกระบวนการผลิตเซลล์ผิวตามธรรมชาติ
- ช่วยขจัดความหมองคล้ำ แห้งกร้าน เผยผิวเปล่งปลั่ง เนียนนุ่ม
- ช่วยปรับผิวที่ดูหมองคล้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เทคโนโลยี ageLOC มุ่งเป้าไปที่ต้นตอของปัญหาริ้วรอยแห่งวัยเพื่อคืนความอ่อนเยาว์
- ทำความสะอาดผิวได้อย่างหมดจดล้ำลึก



วิธีการใช้งาน

- ใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณพอเหมาะ นวดลงบนผิวที่เปียกเป็นวงกลมอย่างเบามือ
- ล้างออกและซับให้แห้ง
- ใช้อย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ สามารถใช้ได้ทุกวัน

มอบคุณค่าที่เลดูเรียบเนียนกว่าที่เคย ageLOC Dermatic Effects
ผ่านการคิดค้นสูตรทางวิทยาศาสตร์
ด้วยเทคโนโลยี ageLOC ที่มุ่งเน้นไปที่สาเหตุของริ้วรอย
เพื่อผิวที่เลดูอ่อนเยาว์ ริ้วรอยต่างๆ แลดูจางลง

ageLOC Dermatic Effects ช่วยปรับสภาพผิวให้เรียบเนียน
และเพิ่มความกระชับให้ผิว การใช้เป็นประจำจะช่วยเพิ่มการผลิตเซลล์ผิว
เพื่อคืนความกระชับใสอย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ยังให้ความชุ่มชื้น
และ ทำให้ผิวเลดูเรียบเนียนขึ้นได้อีกด้วย





WellSpa iO

ประสบการณ์ดิจิทัล

WellSpa iO

